belcils MED

Gotas Oftálmicas HIDRATANTE
Gotas Oftálmicas FORTE
Instrucciones de uso – Por favor, leer atentamente

Gotas Oftálmicas, 10 ml

**COMPOSICIÓN:**

**Belcils MED Gotas Oftálmicas HIDRATANTE**

Hialuronato de sodio al 0,21%, cloruro sódico, dihidrogenofosfato sódico dihidrato, fosfato disódico, agua purificada.

Sin conservantes.

**Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE**

Hialuronato de sodio al 0,40%, cloruro sódico, dihidrogenofosfato sódico dihidrato, fosfato disódico, agua purificada.

Sin conservantes.

**INDICACIÓN:**

**Belcils MED Gotas Oftálmicas HIDRATANTE** está indicado para aliviar los síntomas leves del ojo seco.

**Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE** está indicado para aliviar los síntomas severos del ojo seco.

BELCILS MED para ojos secos e irritados contiene la sal sódica del ácido hialurónico, una sustancia natural que se encuentra en el ojo, además de en otras partes del cuerpo humano. El hialuronato sódico es un componente esencial del humor acuoso y del cuerpo vítreo. Con cada parpadeo, el hialuronato sódico crea una película protectora sobre la superficie ocular. Así, elimina eficazmente la sensación de sequedad, arenilla, escozor e irritación.

**Belcils MED Gotas Oftálmicas HIDRATANTE** es ideal para uso diario. Proporciona un efecto hidratante con acción inmediata sobre la superficie del ojo que estabiliza, restaura la película lagrimal y alivia los síntomas leves de sequedad ocular.

**Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE** presenta una elevada viscosidad, siendo adecuada para el uso diario y el cuidado nocturno. La composición, con una elevada concentración de hialuronato sódico, garantiza una retención más duradera en la superficie ocular, estabiliza y repone la película lagrimal con un efecto prolongado de hidratación y protección ocular.

Belcils MED también se utiliza para los ojos secos e irritados después de intervenciones quirúrgicas y para la sequedad ocular causada por el uso de medicamentos antiinflamatorios en el ojo (previa consulta con el médico).

Los factores de riesgo del ojo seco, es decir, la alteración de la película lagrimal causada por la falta de lágrima o por una evaporación excesiva (que puede provocar daños en la superficie ocular y molestias) son:

- Condiciones externas (calefacción central, aire acondicionado, iluminación fluorescente, contaminación atmosférica, humo y viento)
- Estilo de vida moderno (trabajo prolongado frente a una pantalla, vivir, trabajar y viajar en espacios con aire acondicionado)
- Envejecimiento (el 75 % de la población mayor de 65 años padece el síndrome del ojo seco)
- Sexo (cambios hormonales en las mujeres durante el embarazo, la lactancia, la menstruación o la menopausia)
- Uso de lentillas
- Intervenciones quirúrgicas o daños en el ojo
- Presencia de un cuerpo extraño en el ojo
- Uso de medicamentos (antidepresivos, tratamientos para la hipertensión, anticonceptivos)
- Uso de gotas oftálmicas descongestionantes
- Enfermedades (artritis reumatoide, diabetes, asma, enfermedades de la glándula tiroides, glaucoma).

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

No use Belcils MED:

- En caso de hipersensibilidad (alergia) al hialuronato sódico o a cualquiera de los otros componentes de Belcils MED.
- En caso de reacción alérgica, interrumpa de inmediato el uso del producto y consulte a un médico.

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- Si observa que el frasco o el aplicador de Belcils MED está dañado, no utilice el producto.
- Para garantizar una aplicación segura y una higiene adecuada, cada frasco debe ser de uso individual.
- No se conocen interacciones entre Belcils MED y las soluciones para lentillas, otras gotas oftálmicas o pomadas oculares tópicas.
- Si utiliza otro producto oftálmico, espere al menos 15 minutos entre las aplicaciones.

Nota:

Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE puede provocar una visión borrosa momentánea tras su aplicación. Por lo tanto, se recomienda que, durante este breve periodo de tiempo, se abstenga de conducir o manejar cualquier vehículo o máquina, y espere hasta que recupere la visión nítida.

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

La tecnología del gotero incorpora un filtro que garantiza un uso seguro del producto, ya que evita la contaminación de las gotas oftálmicas y conserva la esterilidad del contenido hasta 6 meses después de la apertura.

Belcils MED no contiene conservantes, lo que reduce la posibilidad de irritación y daños en la superficie ocular.

El producto suele ser bien tolerado. No obstante, si nota algún efecto secundario, consulte a su médico o farmacéutico.

**CÓMO USAR BELCILS MED:**

Use siempre Belcils MED siguiendo estas instrucciones de uso. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo si tiene alguna duda.

Si su médico no ha prescrito otra cosa, aplique 1-2 gotas en los ojos, varias veces al día, según sea necesario. Parpadee varias veces para distribuir uniformemente la gota sobre la superficie ocular.

Adecuado para uso prolongado.

Con un uso adecuado, un frasco de 10 ml es suficiente para más de 30 días de uso.

Evitar el contacto de la punta del gotero con la superficie del ojo o con cualquier otra superficie.

Antes de la primera aplicación, es necesario activar el frasco. Para ello, retire el tapón de la bomba dosificadora, voltee el frasco boca abajo y presione el aplicador varias veces hasta que aparezca la primera gota.

**INFORMACIÓN PARA USUARIOS DE LENTILLAS:**

**Belcils MED Gotas Oftálmicas HIDRATANTE** y **Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE** pueden aplicarse sin necesidad de quitarse las lentillas.

Belcils MED hace más cómodo el uso de lentillas.

**FECHA DE CADUCIDAD:**

Impresa en el envase.

El período de caducidad tras la apertura es de 6 meses.

No utilizar el producto después de su fecha de caducidad.

**ALMACENAMIENTO:**

Conservar el producto por debajo de 30 ºC en su envase original.


Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

**EMBALAJE:**

10 ml

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Lávese bien las manos.
2. Retire el tapón de la bomba dosificadora (imagen 1).
3. Sujete la bomba dosificadora con la mano como se muestra en la imagen 2.
4. Voltee el frasco boca abajo y presione el aplicador hasta que aparezca la primera gota (imagen 3).
5. Con la cabeza hacia atrás, aplique cuidadosamente 1 gota en el ojo (imagen 4).
6. Vuelva a colocar el tapón en la bomba dosificadora.

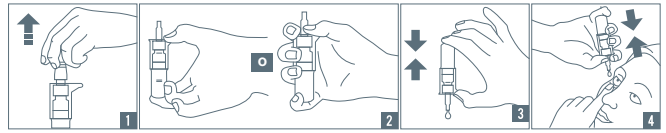

1. Retire el tapón de la bomba dosificadora
2. Sujete la bomba dosificadora con la mano como se muestra
3. Voltee el frasco boca abajo y presione el aplicador hasta que aparezca la primera gota
4. Con la cabeza hacia atrás, aplique cuidadosamente 1 gota en el ojo

**Fecha de revisión: Junio de 2025.**

MD CE 1304

viñas laboratorios Provença 386 - 08025 Barcelona ESPAÑA/SPAIN

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

**EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO:**

- Leer las Instrucciones de uso
- MD — Producto sanitario
- Fabricante
- Distribuidor
- Fecha de caducidad
- LOT — Número de lote
- STERILE A — Técnica de procesamiento estéril y aséptica
- 30°C — Límite máximo de temperatura 30 °C
- Uso múltiple en un solo paciente
- No utilizar si el producto está dañado o perforado
- Precaución, consulte las instrucciones de uso (para advertencias y precauciones importantes)
- CE — Marcado CE
- Desechar el producto en el punto Sigre
- e — Contenido neto

**SÍMBOLOS ADICIONALES EN LA CAJA:**

**Belcils MED Gotas Oftálmicas HIDRATANTE**

- Alivio inmediato del ojo seco provocado por el uso prolongado de pantallas
- Hidratación y alivio ocular durante la conducción y los viajes
- Alivio de las molestias e irritación ocular causada por el uso de lentillas
- 6 M — Caducidad tras la apertura: 6 meses

**Belcils MED Gotas Oftálmicas FORTE**

- Hidratación y protección incluso en casos de ojo seco severo
- Alivio inmediato de la irritación ocular con efecto prolongado
- Protección e hidratación en ambientes secos o con aire acondicionado
- 6 M — Caducidad tras la apertura: 6 meses

130001972/04

**Fecha de revisión: Junio de 2025.**

MD CE 1304

viñas laboratorios Provença 386 - 08025 Barcelona ESPAÑA/SPAIN

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia